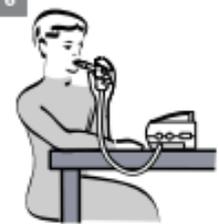
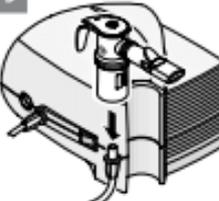


Quelles sont les consignes d'hygiène à bien respecter pour mes séances d'aérosolthérapie?

<p>1</p>  <p>Bien se laver les mains avant chaque séance.</p>	<p>2a</p>  <p>Raccorder l'embout buccal ou le masque au nébuliseur.</p>	<p>2b</p>  <p>En cas d'utilisation du masque pour nourrissons PARI BABY, emboîter le coude et l'orienter en fonction de la position du bébé.</p>	<p>3</p>  <p>Raccorder le nébuliseur au compresseur avec la tubulure ; brancher la prise du compresseur ; appuyer sur l'interrupteur du compresseur.</p>
<p>4</p>  <p>Ouvrir le couvercle du nébuliseur en le faisant basculer vers l'avant.</p>	<p>5</p>  <p>Verser le(s) médicament(s) dans le nébuliseur (volume minimum = 2 ml / maximum = 8 ml). Refermer le couvercle.</p>	<p>6</p>  <p>S'asseoir en se tenant droit mais rester détendu.</p>	<p>7a</p>  <p>Maintenir l'embout buccal entre les dents et serrer les lèvres autour pendant la séance.</p>
<p>7b</p>  <p>Maintenir le nébuliseur à la verticale. En cas d'usage du masque, le maintenir bien appuyé sur le nez et la bouche du patient en exerçant une légère pression.</p>	<p>8</p>  <p>Inspirer calmement et profondément au travers de l'embout buccal ou du masque, puis expirer calmement. Un changement de bruit dans le nébuliseur (gargouillement) indique que la séance est terminée. Eteindre le compresseur.</p>	<p>9</p>  <p>Débrancher le nébuliseur du flexible d'air ; jeter le volume résiduel de médicament. Si de la condensation (buée) s'est formée dans celui-ci, y envoyer de l'air pendant quelques minutes pour le sécher.</p>	<p>10</p>  <p>Pour déconnecter l'appareil complètement du secteur, débranchez la fiche secteur.</p>

Source : société PARI